


CAMBIANDO LA BOBINA DE LA IMPRESORA


Una bobina nueva imprime aproximadamente 100 informes. Para cambiarla, siga las instrucciones abajo:

1. Apague el monitor con la tecla ON.
2. Retire la tapa del compartimiento de la impresora, empujándola en el sentido de las dos flechas, como se muestra en la Figura abajo.

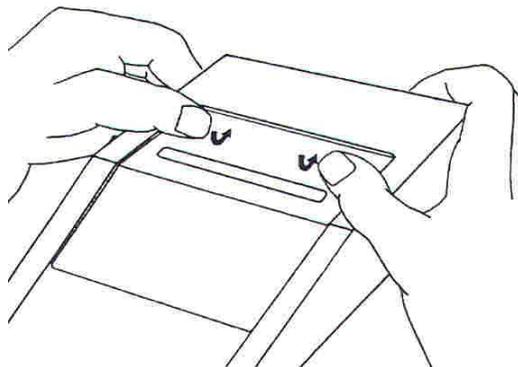


3. Nunca tire el papel en el sentido contrario al de la impresión. RECUERDE: el papel siempre deberá circular en el sentido de la impresión! Corte el papel cerca a la bobina y tire, despacio, el resto del papel por arriba de la impresora, como si estuviera impreso un informe.


4. Corte aproximadamente los 10 cm iniciales de una bobina nueva, eliminando la goma de este lugar. Después, córtela haciendo una punta como muestra la Figura abajo. Esto facilitará el pasaje del papel por adentro de la impresora.

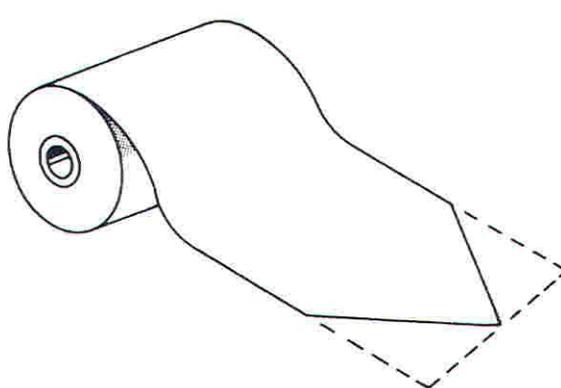

5. Introduzca la punta de la bobina por el agujero de la impresora como muestra la Figura abajo, hasta que la punta del papel aparezca adelante de la impresora.

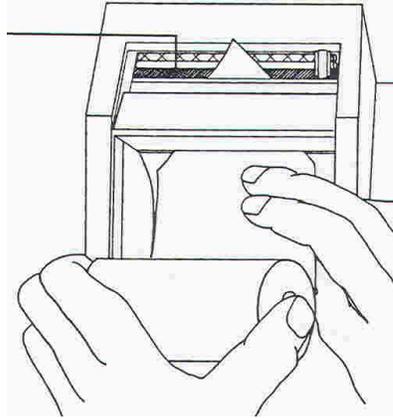

La bobina debe ser colocada con el papel saliendo por abajo, como muestra la Figura abajo.

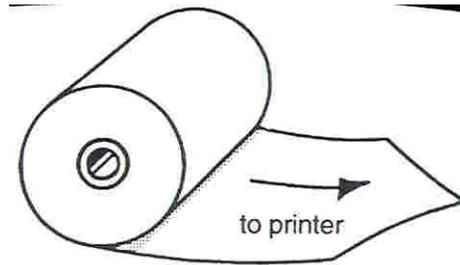

6. Tire despacio el papel de la punta hasta que esté aproximadamente 2 cm arriba de la impresora y bien centralizado. Al tirar de la punta del papel, usted oirá el ruido típico del engranaje de la impresora, lo que es normal.

7. Coloque la tapa del compartimiento de la impresora, sin olvidarse de pasar el papel por el orificio de la tapa.

8. Prenda el monitor, espere la realización de la autoprueba, apriete la tecla DATA y enseguida la tecla FEED para avanzar en blanco un poco de papel, certificándose que el papel está pasando libremente por la impresora.